

REF L002030309001



LumiraDx Group Limited,
2021 - © Alle rettigheder forbeholdes, på verdensplan.

LumiraDx Limited
3 More London Riverside
London
SE1 2AQ
Storbritannien
Virksomhedsnummer: 09206123

ART-00308 Rev3

Brugervejledning til Connect

Indhold

1	Forkortelser	3
2	Oversigt over LumiraDx Connect	4
2.1	LumiraDx Connect Manager	6
2.2	LumiraDx Connect App	7
2.3	LumiraDx Connect Hub	7
2.4	EHR Connect	8
3	Kom godt i gang	9
3.1	Udpakke Connect Hub	9
3.2	Installere LumiraDx Connect App	9
3.3	Tænde for Connect Hub	10
3.4	Connect Hub-konfiguration	10
3.5	Konfigurere en Connect Hub med en kabelforbindelse Ethernet-forbindelse	10
3.6	Konfigurere en Connect Hub med en trådløs forbindelse	15
3.7	Bruge en mobil enhed som en Connect Hub	19
4	Connect Manager-systemet	20
4.1	Arbejdsgrupper	21
4.2	Brugere	23
4.3	Instrumenter	29
4.4	Analyseresultater	30
4.5	Individuelle indstillinger	34
4.6	Organisations- og Kvalitetskontrolindstillinger	35
5	Øvrigt	41
5.1	Logge på Connect Manager	41
5.2	Krav til brugernavn og adgangskode	42
5.3	Programopdateringer	42
6	Kundeservice	43
7	Sikkerhed	44
7.1	Compliance med generel forordning om databeskyttelse (GDPR)	44
8	Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger	45
9	Juridisk meddelelse	48

1 Forkortelser

EHR	Electronic Health Record (elektronisk patientjournalsystem)
FIPS	Federal Information Processing Standard (Føderal standard for behandling af oplysninger)
GDPR	General Data Protection Regulation (generel forordning om databeskyttelse)
ID	Identifikation
SSID	Service Set Identifier (netværksidentifikator)
LIS	Laboratorier – informationssystem
HIS	Hospitaler – informationssystem

2 Oversigt over LumiraDx Connect

LumiraDx Connect er en smart, integreret tilslutningsplatform, der lader brugere konfigurere og styre LumiraDx patientnære Platform Instruments via fjernstyring og overføre analyseresultater til et eksisterende elektronisk patientjournalssystem (EHR). Dette drives af LumiraDx Connect Manager og EHR Connect.

For at anvende LumiraDx Connect anbefales det, at følgende kontroller er udført og information indhentet fra jeres it-afdeling før opsætning og konfiguration af LumiraDx Connect fortsættes.

- Lokalt netværkskonfiguration
 - Undersøg, om der er en præference med hensyn til ethernet-forbindelse eller trådløs forbindelse
 - Hvis jeres netværk bruger en "Proxy", skal I bruge følgende information:
 - "Værtsnavn" på proxyen.
 - "Port"-nummeret på proxyen.
 - Brugernavn og adgangskode, om nødvendigt.
 - Hvis I vil bruge Wi-Fi til at forbinde, skal I bruge følgende oplysninger:
 - 'SSID'-navnet på jeres Wi-Fi.
 - Adgangskoden til jeres Wi-Fi.
 - Hvis jeres lokale it-netværk kræver adgangstilladelse til sikre websteder, skal der tillades udgående adgang til *.lumiradx.com på port 80 og 443.
- Installation af program på mobile enheder
 - Du skal installere en app fra den offentlige App Store på en mobil enhed eller en tablet.

Selvstændigt

Kør patientanalyser og Kvalitetskontroller.

Gem analyseresultater sammen med tidspunkt, dato og patient-id.



LumiraDx Instrument

Styret

Konfigurer et enkelt eller flere instrumenter.

Opret arbejdsgrupper og legitimationsoplysninger til brugerlogin.

Administrer overholdelsespolitikker og styringsfunktioner.



LumiraDx Instrument

*og LumiraDx Connect Hub
eller LumiraDx Connect App*



LumiraDx Connect Manager

EHR forbundet

Integrerer med det elektroniske patientjournalssystem til overførsel af patientens analyseresultater.

Vis patientens analyseresultater på jeres LIS eller HIS.



LumiraDx Instrument

*og LumiraDx Connect Hub
eller LumiraDx Connect App*



LumiraDx Connect Manager




Elektronisk patientjournalssystem

2.1 LumiraDx Connect Manager

LumiraDx Connect Manager giver en administrator mulighed for at kunne overvåge fjernpatient- og Kvalitetskontrolanalyser, hvilket vil lette kvalitetssikringen. LumiraDx Connect Manager er et skybaseret webstedprogram og mobilapp til native iOS og Android, som kan anvendes til hurtig, nøjagtig håndtering af alle jeres LumiraDx Instrumenter. Det kan bruges til at:


- Oprette arbejdsgrupper
- Tildele brugere og LumiraDx Instrumenter til arbejdsgrupper for lettere håndtering
- Håndtere brugere og administratorer
- Monitøre og håndtere instrumenter og Connect Hub
- Vise resultater af instrumentanalyser og Kvalitetskontroller
- Administration af Kvalitetskontrolpolitik
- Administrering af brugertræning

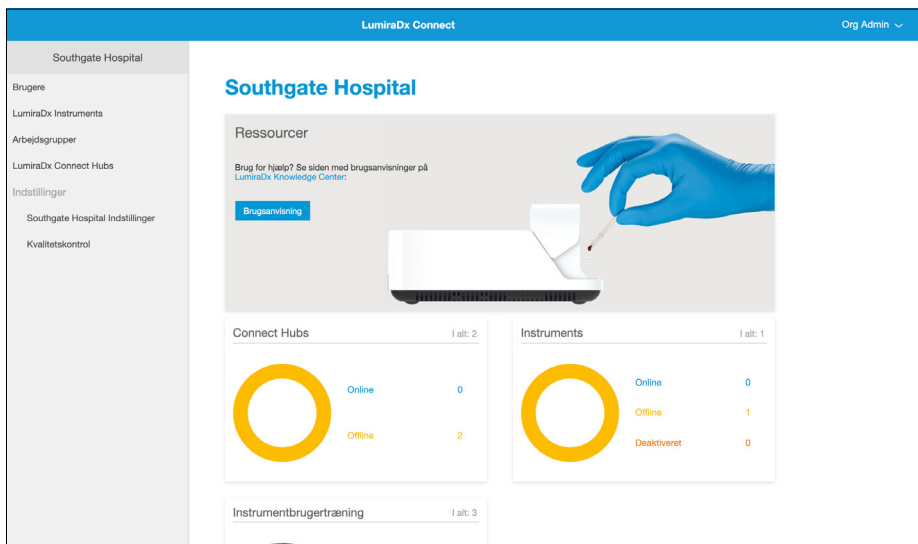

2.2 LumiraDx Connect App

LumiraDx Connect App er et program til native iOS og Android, som agerer som en mobil version af LumiraDx Connect Manager. Ud over at give adgang til Connect Manager fra en mobil enhed eller en tablet, kan LumiraDx Connect appen også bruges til at:

- Udføre indledende konfiguration og tilslutning af Connect Hubs til et Wi-Fi-netværk.
- Fungere som en alternativ metode til at forbinde et instrument til LumiraDx Connect, når det anvendes uden for rækkevidde af en Connect Hub.

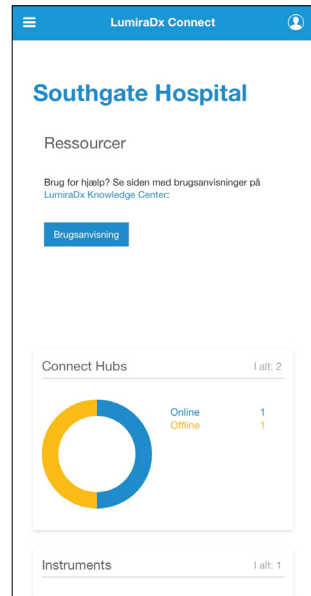

2.3 LumiraDx Connect Hub

LumiraDx Connect Hub er et selvstændigt modul, som lader instrumenter automatisk kommunikere med Connect Manager-programmet gennem en Bluetooth Low Energy-tilslutning.



Connect Hub:

- Problemfri og trådløs overførsel af analyseresultater indsamlet med LumiraDx Instrumenter
- Er meget sikker - instrumenterne kommunikerer kun gennem angivne hubs
- Forbinder automatisk til instrumenter inden for en afstand på 10 meter
- Forbinder til et netværk ved brug af Wi-Fi eller Ethernet
- Tilbyder understøttelse af op til 7 Instruments fra hver Connect Hub samtidigt
- Har en enkel grænseflade, der viser strøm- og forbindelsesstatus
- Er udstyret med udskiftelige strømstik, som er kompatible med strømkontakter i de fleste geografiske områder
- Det er nemt at opsætte brugen af LumiraDx Connect App

2.4 EHR Connect

EHR Connect er en ekstra tjeneste, der muliggør problemfri forbindelse mellem LumiraDx Instrumentet og eksisterende elektroniske patientjournalssystemer, der muliggør, at analyseresultater gemmes i patientjournalerne. Integration med en lang række sundhedssystemer er understøttet, og teknologien er kompatibel med standarder for industri drift, såsom HL7, GDT mfl., og er fleksibel til at understøtte både cloud- og lokalt baserede installationer.

EHR Connect kan yde ekstra support til overførsel af analyseresultater, patient-positiv bekræftelse af tidspunktet for patientanalysen, administration af Instrumentoperatører og politikindstillingerne for Kvalitetskontrol, enten gennem problemfri integration med Connect Manager eller en organisations eksisterende middleware-system. Omfanget af integrationen afhænger af det styringsplan, der understøttes af middleware-udbyderen.

Der kan rekvireres yderligere oplysninger om denne ekstra tjeneste hos LumiraDx kundeservice.

3 Kom godt i gang

3.1 Udpakke Connect Hub

LumiraDx Connect Hub-pakken indholder følgende:

- LumiraDx Connect Hub
- Strømskik til LumiraDx Connect Hub
- Indlægsseddel til LumiraDx Connect Hub

Efterse Connect Hub og emballagen for beskadigelse før brug. Af sikkerhedsmæssige grunde må der ikke tilsluttes en beskadiget Connect Hub, og eventuel beskadigelse skal rapporteres til kundeservice. Kontaktoplysningerne findes i kapitlet Kundeservice i denne brugervejledning til Connect.


3.2 Installere LumiraDx Connect App

Jeres organisations udpegede administrator vil tilse opstillingen af LumiraDx og vil modtage de indledende tilslutningsoplysninger fra LumiraDx. Disse oplysninger skal bruges første gang, der logges på Connect Manager.

LumiraDx Connect App fås på Android og iOS App Store. Installér Connect App på en mobil enhed ved at åbne App Store, søge efter LumiraDx Connect og installere appen.

Bemærk: Hvis appen på Android-enheder anmoder om "Tillad at Connect får adgang til denne enheds placering?" Vælg "Tillad". Android-enheder vil ikke tillade forbindelse via Bluetooth, medmindre adgang til enhedens placering er tilladt.

1. Åbn appen, og indtast den givne adgangskode.
2. Tryk på/vælg 'Valider adgangskode'.
3. Indtast brugernavn, derefter adgangskode.
4. Tryk på 'Login'.

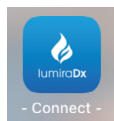

3.3 Tænde for Connect Hub

Brug det rigtige Connect Hub-stik, og tilslut Connect Hub til en stikkontakt i væggen. Når Connect Hub er tændt, vil strømindikatoren lyse.

3.4 Connect Hub-konfiguration

Når Connect Hubs er konfigureret, vil de automatisk begynde at overføre data mellem LumiraDx Instrumenter og Connect Manager og den elektroniske sygejournal. Connect Hubs kan kun konfigureres ved brug af LumiraDx Connect App på en mobil enhed. Den mobile enhed og Connect Hub skal være inden for en afstand på 10 meter for at installationen kan lykkes.

3.5 Konfigurere en Connect Hub med en kabeltilsluttet Ethernet-forbindelse


Hvis jeres organisation ikke kræver brug af en proxy, kan I muligvis begynde brugen af jeres Connect Hub ved ganske enkelt at slutte den til en strømforsyning og sætte Ethernet-kablet i Ethernet-porten på Connect Hub.


Hvis jeres organisation kræver brug af en proxy, skal I følge disse trin:


1. Login på Connect App på en mobil enhed, og tryk på menuikonet  øverst til venstre på skærmen for at åbne menuen

Bemærk: Husk, at Bluetooth skal være slået til på den mobile enhed


2. Tryk på 'LumiraDx Connect Hubs'.

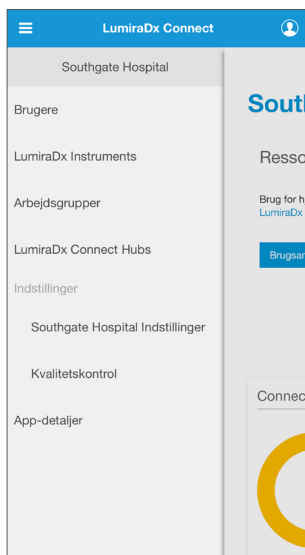

3. Tryk på funktionsmenuen  for den Connect Hub, der skal konfigureres.

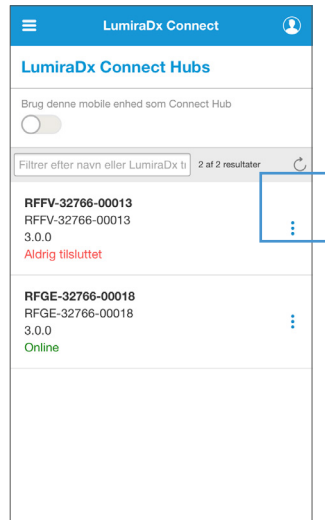


4. Tryk på "Konfigurer" i rullemenuen.

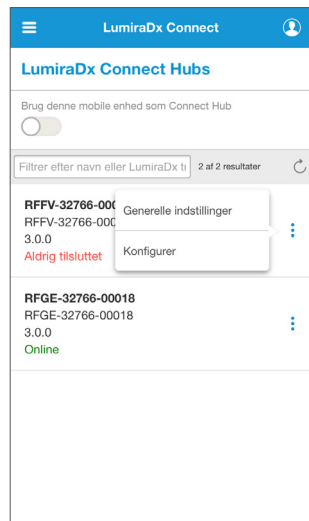

5. Tag stikket til LumiraDx Connect Hub ud af strømkilden, vent 10 sekunder, og sæt det i strømkilden igen.
6. Sæt den ene ende af Ethernet-kablet i Connect Hub Ethernet-porten og den anden ende af kablet enten i en Ethernet-kontakt i væggen eller en router.
7. Vent cirka et minut, hvorefter statuslampen for Connect begynder at blinke hurtigt.
8. Tryk på "Scan for Connect Hub"


Connect App vil nu forbinde til Connect Hub, og du vil nu se konfigurationsindstillingerne for Connect Hub.

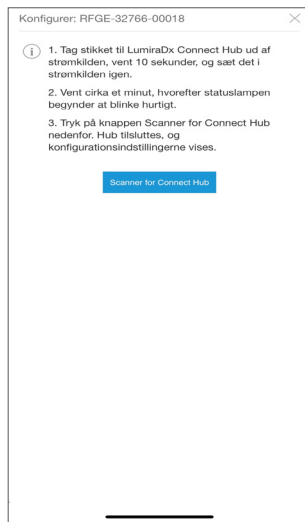

9. Vælg 'Kabeltilsluttet' ud for 'Forbindelse'.
10. Det kan være nødvendigt at kontakte din it-afdeling for at få de aktuelle 'Proxy'-oplysninger. Hvis jeres organisation ikke kræver brug af en proxy, skal du vælge 'Ingen' i menuen 'Proxy'.

Hvis jeres organisation kræver brug af en proxy, skal du vælge 'Manuel' i menuen 'Proxy' og derefter udfylde felterne nedenfor.

Bemærk: Hvis du ikke ved, hvilke værdier, du skal indtaste i disse felter, skal du spørge jeres netværksadministrator.

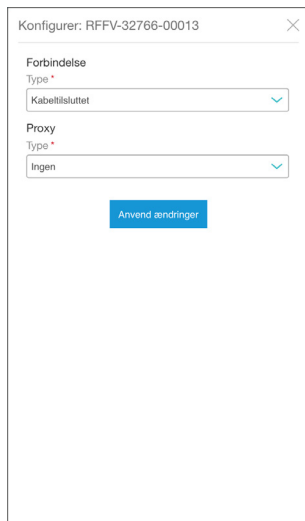

11. Tryk på "Anvend ændring".

Konfigurer: RFFV-32766-00013

Forbindelse

Type *
Kabeltilsluttet

Proxy

Type *
Manuel

Værtsnavn *
URL eller IP-adresse

Port *
0

Brugernavn

Adgangskode

Anvend ændringer

12. En bekræftelsesmeddelelse viser, at konfigurationsindstillingerne er blevet anvendt.
13. Connect Hub "Connect"-lyset skifter fra at blinke grønt til at lyse konstant grønt inden for 60 sekunder.

Konfigurer: RFFV-32766-00013

Forbindelse

Type *
Wi-fi

SSID *
LumiraDx


Adgangskode

Proxy

Type *
Ingen

Anvend ændringer

14. Connect App vil nu vise, at Connect Hub er online.

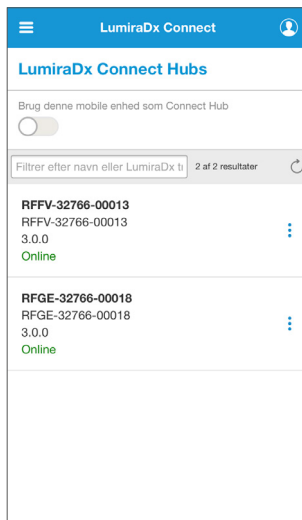


3.6 Konfigurere en Connect Hub med en trådløs forbindelse


1. Login på Connect App på en mobil enhed, og tryk på menuknappen ☰ øverst til venstre på skærmen for at åbne menuen.

Bemærk: Husk, at Bluetooth skal være slået til på din mobile enhed.


2. Tryk på 'LumiraDx Connect Hubs'.

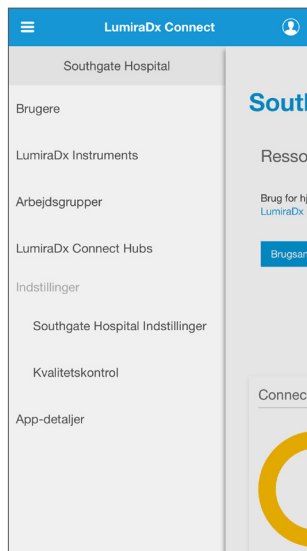

3. Tryk på funktionsmenuen ⋮ for den Connect Hub, som skal konfigureres.

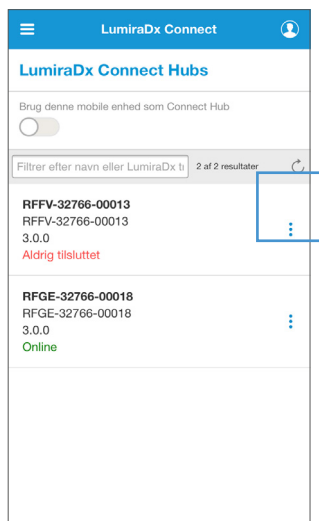


- Tryk på "Konfigurer" i rullemenuen.

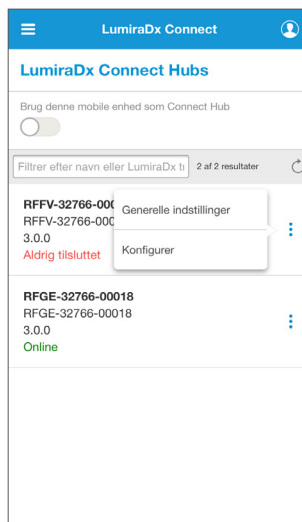

- Tag stikket til LumiraDx Connect Hub ud af strømkilden, vent 10 sekunder, og sæt det i strømkilden igen.
- Vent cirka et minut, hvorefter statuslampen for Connect begynder at blinke hurtigt.
- Tryk på "Scan for Connect Hub"

Connect App vil nu forbinde til Connect Hub, og du vil få vist konfigurationsindstillingerne for Connect Hub.

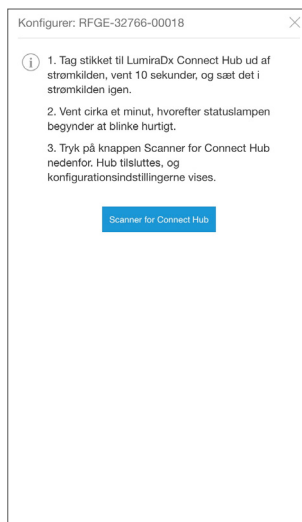

- Vælg 'Wi-Fi' ud for 'Forbindelse'.
- Indtast Service Set Identifier (SSID eller netværksnavn) for Wi-Fi-netværket ud for 'SSID'.

Bemærk: Hvis du ikke ved, hvad jeres SSID er, skal du spørge jeres netværksadministrator.

- Indtast Wi-Fi-adgangskoden.
- Hvis jeres organisation ikke kræver brug af en proxy, skal du vælge 'Ingen' i menuen 'Proxy'.

Hvis jeres organisation kræver brug af en proxy, skal du vælge 'Manuel' i menuen 'Proxy' og derefter udfylde felterne nedenfor.

Bemærk: Hvis du ikke ved, hvilke værdier, du skal indtaste i disse felter, skal du spørge jeres netværksadministrator.

- Tryk på "Anvend ændringer".

Konfigurer: RFFV-32766-00013

Forbindelse

Type *
Wi-Fi

SSID *
[Empty field]

Adgangskode
[Empty field]

Proxy

Type *
Ingen

Anvend ændringer

Konfigurer: RFFV-32766-00013

Forbindelse

Type *
Wi-Fi

SSID *
[Empty field]

Adgangskode
[Empty field]

Proxy

Type *
Manuel

Værtsnavn *

UURL eller IP-adresse
[Empty field]


Port *
0

Brugernavn
[Empty field]


Adgangskode
[Empty field]

Anvend ændringer

13. En bekræftelsesmeddelelse viser, at konfigurationsindstillingerne er blevet anvendt.
14. Connect Hub "Connect"-lyset skifter fra at blinke grønnt til at lyse konstant grønnt inden for 60 sekunder.

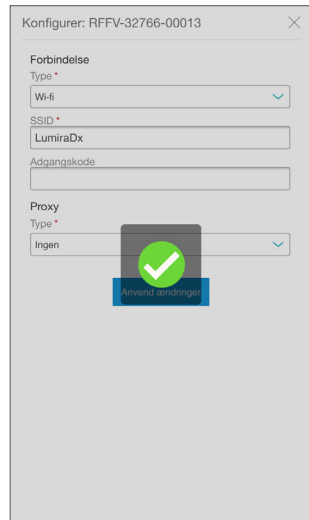


15. Connect App vil nu vise, at Connect Hub er online.

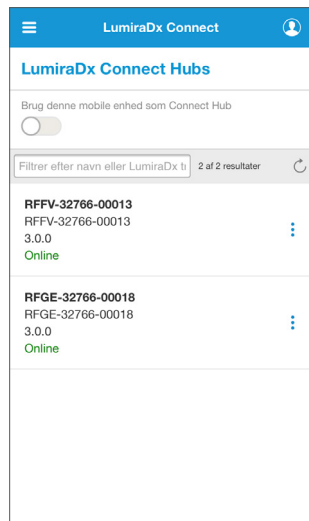

3.7 Bruge en mobil enhed som en Connect Hub

Hvis et LumiraDx Instrument er uden for rækkevidde af en Connect Hub, men skal styres af Connect Manager eller bruges til at sende analyseresultater til Connect Manager, kan en mobil enhed bruges som et alternativ til LumiraDx Connect Hub.

1. Login på Connect App på en mobil enhed, og tryk på menuknappen ☰ øverst til venstre på skærmen for at åbne menuen.
2. Tryk på "LumiraDx Connect Hubs".
3. På siden Connect Hubs skal du aktivere den mobile enhed til at fungere som Connect Hub. Brug glideren.
4. Tryk på > ikonet for at se, hvilke Instrumenter mobilenheden er tilsluttet.

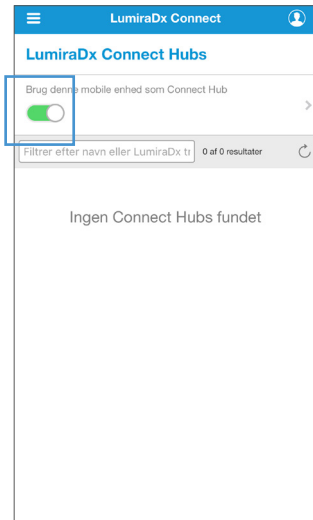

4. Connect Manager-systemet

Connect Manager-webstedet eller Connect App kan bruges til at oprette den administrative infrastruktur for LumiraDx Platform.

Brugere af Connect Manager og instrumenter kan have forskellige roller:

- **Organisationsadministrator** er en administrator for hele organisationen. De kan logge på Connect Manager, oprette nye brugere, redigere eksisterende brugere, oprette arbejdsgrupper og redigere indstillingerne for hver arbejdsgruppe.
- **Arbejdsgruppeadministrator** er en administrator for en eller flere valgte arbejdsgrupper. De kan logge på Connect Manager og tilføje Instrumentoperatører til deres specifikke arbejdsgrupper.
- **Instrumentadministrator** kan logge på LumiraDx Instrumenter, udføre opsætning og opgraderinger og udføre analyser.
- **Instrumentoperatører** kan logge på LumiraDx Instrumenter for at udføre analyser.


4.1 Arbejdsgrupper

Instrumenter og brugere kan tildeles til arbejdsgrupper (f.eks. kardiologi). Dette muliggør kontrol af, hvilke brugere der kan anvende hvilke Instrumenter. Området Indstillinger for arbejdsgruppe vil være skjult og ikke tilgængeligt, hvis instrumentoperatørerne administreres gennem en middleware-udbyder.

Bemærk: Instrumenterne kan kun figurere i en arbejdsgruppe, mens brugere kan tildeles til en eller flere.


Tilføje en ny arbejdsgruppe:

1. Organisationsadministratoren skal logge på Connect Manager.
2. Tryk på 'Arbejdsgrupper' for at få vist en liste over eksisterende arbejdsgrupper.
3. Tryk på +

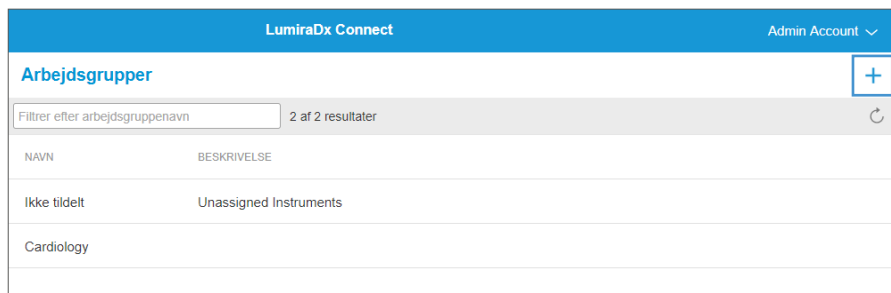

NAVN	BESKRIVELSE
Ikke tildelt	Unassigned Instruments
Cardiology	

4. Indtast navnet på den nye arbejdsgruppe
5. Eller indtast en kort beskrivelse af den nye arbejdsgruppe. Denne beskrivelse vises ved siden af arbejdsgruppens navn, når den vælges.
6. Hver arbejdsgruppe er som standard indstillet til organisationens tidszone. Vælg 'Tilslidesæt organisationens tidszone' for at vælge en anden tidszone til arbejdsgruppen. Vælg den korrekte tidszone fra rullemenuen.
7. Tryk på 'Anvend ændringer'.

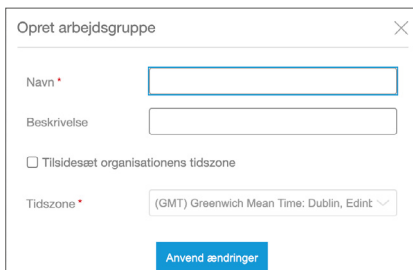

Opret arbejdsgruppe

Navn *

Beskrivelse

Tilslidesæt organisationens tidszone

Tidszone * (GMT) Greenwich Mean Time: Dublin, Edint

Anvend ændringer

Vælg arbejdsgruppen fra listen for at se, hvilke indstillinger, instrumenter og brugere, der tilhører en arbejdsgruppe.

Vælg mærkaterne 'Brugere' eller 'Instrumenter' for at se listen over brugere og Instrumenter i arbejdsgruppen. Vælg fanen 'Indstillinger' for at få vist indstillingerne for arbejdsgruppe og tilsidesætte organisationens politik for kvalitetskontrol, hvis det er nødvendigt. Administratorer kan også tilsidesætte organisationens tidszone for at muliggøre, at hver arbejdsgruppe kan bruge en lokal tidszone. Der henvises til kapitlet "Organisations- og Kvalitetskontrolindstillinger" i denne brugervejledning til Connect for yderligere oplysninger.









LumiraDx Connect				Org Admin
Southgate Hospital	← Arbejdsgrupper			
Brugere	Cardiology			
LumiraDx Instruments	Brugere		Instrumenter	Indstillinger
Arbejdsgrupper	<input type="text" value="Filter efter navn eller brugernavn"/> 4 af 9 resultater			
LumiraDx Connect Hubs	NAVN	BRUGERNAVN	ROLLER	
Analyseresultater	Aktiv			
Indstillinger	One, Nurse	nurse2	Instrument-administrator, Organisationsadministrator	
Southgate Hospital Indstillinger	User 1, Nurse	operator1	Instrument-operator	
Kvalitetskontrol	User 2, Nurse	operator2	Instrument-operator	
	Admin, WorkGroup	wgadmin	Instrument-administrator, Arbejdsgruppeadministrator	

4.2 Brugere


Sådan redigeres eller oprettes en ny bruger:

Organisationsadministratoren skal logge på Connect Manager

Tryk på en bruger fra listen på siden Brugere for at redigere, eller tryk + for at oprette en ny bruger.


Brugere			+
	<input type="text" value="Filtrer efter navn eller brugernavn"/>	5 af 7 resultater	 
NAVN	BRUGERNAVN	ROLLER	
Aktiv			
Last Name, First Name	admin	Instrument-administrator, Organisationsadministrator	
Admin, Org	root.94efa	Organisationsadministrator	
Smith, Steven	stevensmith	Instrument-operator, Organisationsadministrator	
Træning udløbet			
Doe, Jane	jd	Instrument-operator	
Doe, John	jdoe	Instrument-administrator, Organisationsadministrator	

Tryk på filterikonet for at filtrere listen over viste brugere.

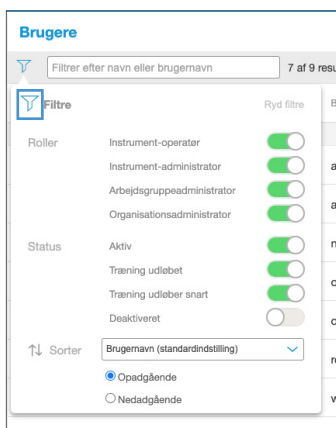

Brugere

Filtrer efter navn eller brugernavn 7 af 9 resul

 **Filtre** Ryd filtre

Roler

- Instrument-operator
- Instrument-administrator
- Arbejdsgruppeadministrator
- Organisationsadministrator

Status

- Aktiv
- Træning udløbet
- Træning udløbet snart
- Deaktiveret

Sorter Brugernavn (standardindstilling)

Opadgående Nedadgående

De markerede felter skal udfyldes.

'Brugernavn' vil blive brugt til at logge på et instrument eller på Connect Manager.

Bemærk: Der skelnes mellem store og små bogstaver i brugernavne.

En e-mailadresse kan kun bruges én gang af en enkelt bruger i en organisation.

Opret ny bruger

Brugeren har ikke adgang til e-mail

Brugernavn *

E-mail *

Titel

Fornavn *

Efternavn *

Initialer

Sprog *

Connect Manager-roller

Instrument-roller

Anvend ændringer

Hvis en ny bruger ikke har en e-mailkonto, skal du bruge skydeknappen til at angive et brugernavn og en adgangskode til vedkommende.

Bemærk: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle organisationer. Kontakt LumiraDx's kundeservice på customerservices@lumiradx.com for at få flere oplysninger.

'Connect Manager-roller' - vælg en af følgende:

- Ingen
- Organisationsadministrator
- Arbejdsgruppeadministrator

Bemærk: Hvis du vælger Arbejdsgruppeadministrator, skal du vælge den arbejdsgruppe administratoren tilhører.

'Instrumentroller' - angiver, hvorvidt brugeren er instrumentoperatør eller instrumentadministrator.

Tildel bruger relevante arbejdsgrupper.

Vælg, om håndhævelse af træningscompliance er påkrævet og træningens udløbsdato.

Opret ny bruger

Brugeren har ikke adgang til e-mail

Brugernavn *

Ny adgangskode *

Bekræft ny adgangskode *

Titel

Fornavn *

Efternavn *

Initialer

Sprog *

Connect Manager-roller

Instrument-roller

Instrument-arbejdsgrupper

Håndhæv udløb af instrument-brugertæning

Anvend ændringer

Bemærk: Hvis 'Instrumentoperatør' er valgt, vil brugeren kunne logge på Instrumenter og administrere analyser. Hvis 'Instrumentadministrator' er valgt, vil brugeren kunne logge på Instrumenter, udføre opsætning og opgraderinger samt administrere analyser. Vælg de relevante arbejdsgrupper for denne bruger fra den tjekliste, der vises.

Brugere kan ikke selv ændre deres arbejdsgruppe- eller Instrument-roller. Ændringer skal foretages af en anden organisationsadministrator.

Bemærk: Hvis Instrumentoperatørerne administreres gennem en middleware-udbyder, er Arbejdsgruppe- og Instrumentroller ikke tilgængelige. Instrumentoperatører skal sættes op via det middleware-forbundne system. Brugere af Connect Manager kan stadig oprettes og administreres gennem Connect Manager.

Når der er oprettet en ny bruger, sendes der automatisk en e-mail til brugerens e-mailadresse med den indledende adgangskode, som udløber efter 24 timer.

Hvis en administrator har angivet et brugernavn og adgangskode for brugeren, skal brugeren ændre sin adgangskode efter det første login.

For at deaktivere eller aktivere en bruger eller nulstille en brugers adgangskode trykkes på funktionsmenuen  for den pågældende bruger.

Hvis der er konfigureret en brugerkonto uden en e-mailadresse, vises følgende i menuen:


- Deaktiver bruger
- Opret ny adgangskode

Admin2, Org	admin2	Instrument-operatør, Organisationsadministrator	
One, Nurse	nurse2	Instrument-administrator, Organisationsadministrator	
User 1, Nurse	operator1	Instrument-operatør	

Deaktiver bruger

Opret ny adgangskode

Hvis du vælger 'Opret ny adgangskode', kan organisationens administrator oprette en ny adgangskode for brugeren.

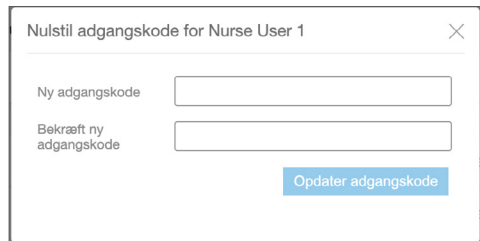

Nulstil adgangskode for Nurse User 1

Ny adgangskode

Bekræft ny adgangskode

Opdater adgangskode

Hvis der er oprettet en brugerkonto med en e-mailadresse som login, vises følgende i menuen:

- Deaktiver bruger
- Send e-mail om nulstilling af adgangskode
- Opret ny adgangskode

NAVN	BRUGERNAVN	ROLLER	
Aktiv			Deaktiver bruger
Admin, Org	admin	Instrument-operator, Organisationsadministrator	Send e-mail om nulstilling af ...
Admin2, Org	admin2	Instrument-operator, Organisationsadministrator	Opret ny adgangskode

Hvis du vælger 'Send e-mail om nulstilling af adgangskode,' sendes der automatisk en e-mail til brugeren med deres nye adgangskode.

 **Admin User**

Er du sikker på, at du vil nulstille denne brugers adgangskode? En ny adgangskode vil blive sendt via e-mail til kontoens e-mailadresse.

[Nulstil adgangskode](#)
[Afbryd](#)

Instrumentoperatørtræning

Startskærmen viser status for instrumentoperatørtræningen.

Aktiv – Brugere inden for træningens udløbsdato

Udløber snart – Brugere hvis træning udløber om 14 dage

Udløbet – Brugere hvis udløbsdato for træning er overskredet. Disse brugere vil ikke være i stand til at udføre patientanalyser, før deres træning er opdateret og en ny udløbsdato for træning er sat.

Klik på en brugerstatus for at se en filtreret visning af disse brugere.


Bemærk: Brugerkonti uden en e-mailadresse får ikke besked, hvis træningen er udløbet. Administratorer skal holde øje med kontrolpanelet på startskærmen og give brugerne besked, når træningen er ved at udløbe.




4.3 Instrumenter

En organisations Instrumenter kan tildeles til specifikke Arbejdsgrupper. Dette er praktisk, hvis en organisation foretrækker at begrænse brugen af et instrument til visse afdelinger. Et instruments arbejdsgruppe og andre indstillinger kan opdateres via siden Instrumenter i Connect Manager.

Sådan opdateres et Instruments generelle indstillinger:

1. Organisations- eller arbejdsgruppeadministratoren skal logge på Connect Manager.
2. Tryk på "LumiraDx Instrumenter".
3. Tryk på funktionsmenuknappen  og "Generelle indstillinger" for at se og redigere Instrumentindstillingerne.

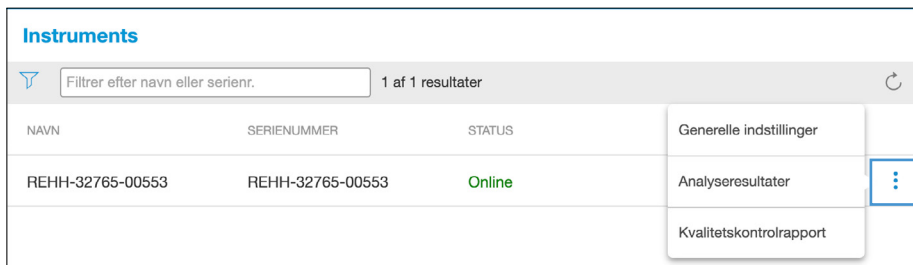


NAVN	SERIENUMMER	STATUS	
REHH-32765-00553	REHH-32765-00553	Online	<div><p>Generelle indstillinger</p><p>Analyseresultater</p><p>Kvalitetskontrolrapport</p></div>

4. 'Instrumentnavn' – indtast et navn, der skal være forskelligt fra instrumentets standardnavn.
5. 'Arbejdsgruppe' – vælg den arbejdsgruppe, som instrumentet er tildelt til.

Bemærk: Instrumenter er som standard tildelt til arbejdsgruppen 'Unassigned'. Flyt instrumenterne til en arbejdsgruppe oprettet af (eller til) jeres organisation.

Advarsel: Hvis tildelingen af et Instrument til en Arbejdsgruppe ændres, ryddes alle ændringer og operatører fra Instrumentet, og nye indstillinger sendes baseret på den nye Arbejdsgruppe.

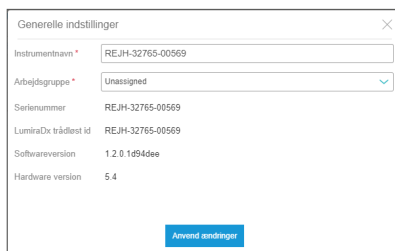

Instrumentnavn *	REJH-32765-00569
Arbejdsgruppe *	Unassigned
Serienummer	REJH-32765-00569
LumiraDx trådløst id	REJH-32765-00569
Softwareversion	1.2.0.1094dee
Hardware version	5.4

Anvend ændringer

En meddelelse vil spørge brugeren, om der skal slettes analysedata fra Instrumentet ved ændring af arbejdsgrupper, eller om analysedataene skal bibeholdes.

Advarsel: Når der vælges "Slet data og start Instrument op igen", betyder det, at analysedata kun vil være synlige i Connect Manager.

Generelle indstillinger ✕

Instrumentnavn *

Arbejdsgruppe *

⚠ Arbejdsgruppe modificeret

Vil du slette alle analysedata på instrument?

Slet data og start Instrument op igen

Behold data

Serienummer REJH-32765-00569

LumiraDx trådløst id REJH-32765-00569

Softwareversion 1.2.0.1d94dee

Hardware version 5.4

[Anvend ændringer](#)

6. Tryk på 'Anvend ændringer'.

Bemærk: Menuen Arbejdsgruppe skjules for organisationer, der administrerer Instrumentoperatører gennem en middleware-udbyder.

4.4 Analyseresultater

Resultater af patient- og kvalitetskontrolanalyser kan ses fra kontrolpanelet for analyseresultater eller fra siden Instrumenter. Resultaterne kan også eksporteres til en .CSV fil, hvis det er nødvendigt.

Sådan får du vist kontrolpanelet for analyseresultater:

1. Organisations- eller arbejdsgruppeadministratoren skal logge på Connect Manager
2. Tryk på 'Analyseresultater' for at få vist kontrolpanelet for patientanalyse og QC-analyse

Analyseresultater

viser 8 resultater Eksporter resultater ↻

Filter Ryd filtre

Etternavn

Serienummer

Arbejdsgruppe

Analysestype

Datoomsråde

[Afbyt](#) [Anvend](#)

Fejl		Fejl (%)	
0	0	0%	0%

QC-ANALYSER		
3	0	0%
0	0%	3

RESULTAT	STATUS	OPERATØR	ARBEJDSGRUPPE	SERIENUMMER		
PASS	Accepteret	20 chars	Unassigned	REJH-32765-00569		
PASS	Accepteret	20 chars	Unassigned	REJH-32765-00569		
mar 18, 2021 14:13	INR	1.1	Accepteret	20 chars	Unassigned	REJH-32765-00569
mar 18, 2021 14:13	SARS-CoV-2 Ag	POSITIVE +	Accepteret	Jones, M.	Unassigned	REJH-32765-00569
mar 15, 2021 17:44	SARS-CoV-2 Ag	POSITIVE +	Accepteret	Jones, M.	Unassigned	REJH-32765-00569
mar 15, 2021 17:41	SARS-CoV-2 Ag	NEGATIVE -	Accepteret	Jones, M.	Unassigned	REJH-32765-00569
mar 15, 2021 17:38	SARS-CoV-2 Ag	NEGATIVE -	Accepteret	Smith, J.	Unassigned	REJH-32765-00569

- Tryk på filtreringsikonet for at filtrere listen over analyseresultater
- Filtrer resultaterne efter efternavn, serienummer, arbejdsgruppe, analysetype og datointerval

Analyseresultater

viser 8 resultater

Filtre Ryd filtre

Efternavn

Serinummer

Arbejdsgruppe

Analysetype

Datoområde

- Tryk på et analyseresultat for at se yderligere oplysninger om den pågældende analyse

Patientanalyse SARS-CoV-2 Ag

Arbejdsgruppe
Unassigned

Analyseret af
Jones, M.

Analyseret på
18 mar 2021 14:13

Prøvetype
Podning til næsen

Serie-nr.
REJH-32765-00569

Lot-nr.
5000010

Testkort
301581

Udløb
01 jan 2022 18:59

Kontrol
Ukendt


POSITIVE +
SARS-CoV-2 Ag

Accepteret

- Tryk på "Eksporter" for at sende listen over resultaterne til en .CSV fil

Du kan også få vist resultater af patient- og kvalitetskontrolanalyser for hvert Instrument i din organisation fra siden Instrumenter.

1. Vælg funktionsmenuen  for det instrument, hvis analyseresultater du ønsker vist på siden Instrument, og vælg 'Analyseresultater'.

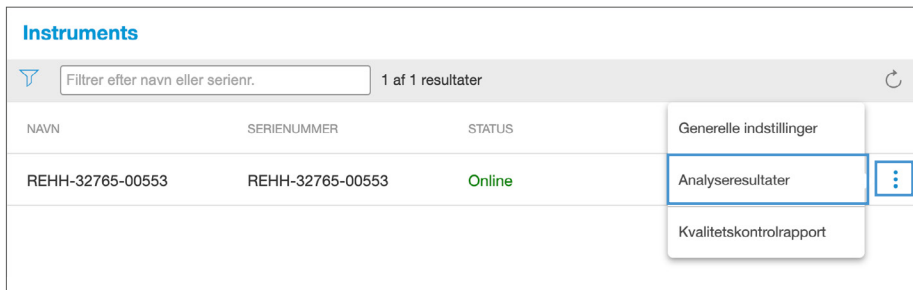


Instruments

1 af 1 resultater

NAVN	SERIENUMMER	STATUS	
REHH-32765-00553	REHH-32765-00553	Online	<ul style="list-style-type: none">Generelle indstillingerAnalyseresultaterKvalitetskontrolrapport

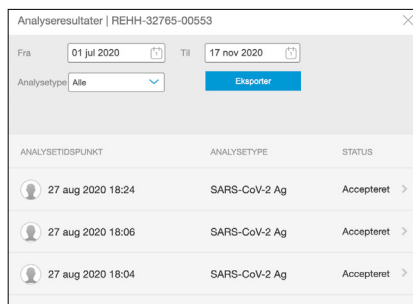


2. Vælg datoområdet for, hvornår analyserne blev udført.
3. Vælg "Analysetype" for at filtrere efter analysetype.
4. Tryk på et analyseresultat for at se yderligere oplysninger om den pågældende analyse.
5. Tryk på "Eksporter" for at sende listen over resultaterne til en .CSV fil.



Analyseresultater | REHH-32765-00553

Fra: 01 jul 2020 Til: 17 nov 2020

Analysetype: Alle Eksporter

ANALYSETIDSPUNKT	ANALYSETYPE	STATUS
 27 aug 2020 18:24	SARS-CoV-2 Ag	Accepteret >
 27 aug 2020 18:06	SARS-CoV-2 Ag	Accepteret >
 27 aug 2020 18:04	SARS-CoV-2 Ag	Accepteret >

Der vises følgende advarsel som et pop op-vindue på skærmen.


Advarsel: Alle data og oplysninger er kun til visningsformål. Brugeren erkender, at enhver eksport af data fra Connect Managers visningsfunktion kan give anledning til fejl i disse data. Brugeren skal på organisationens vegne acceptere eneansvar for brugen af alle data eller oplysninger, der eksporteres fra visningsfunktionen.

Bemærk: Organisationer der administrerer LumiraDx Platform gennem en middleware-udbyder kan fravælge at analyseresultater bliver sendt til Connect Manager. I dette tilfælde vil indstillingen 'Analyseresultater' ikke være tilgængelig fra siden Instruments i Connect Manager.

Kvalitetskontrolrapporter

En pdf-rapport over kvalitetskontrolanalyser kan genereres for hvert Instrument.


Tryk på 'Kvalitetskontrolrapport' på instrumentets funktionsmenu.

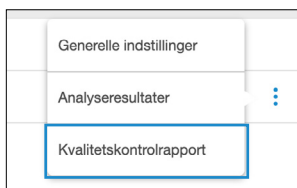

Vælg analysetype, og indtast prøvetypen, datoområde, og indtast eventuelt analysstedets adresse.

Bemærk: Prøvetypen henviser til den type patientprøve(r) der bruges, når der udføres en specifik patientanalyse.

Tryk på 'Download rapport' for at generere kvalitetskontrolrapporten som en pdf-fil.


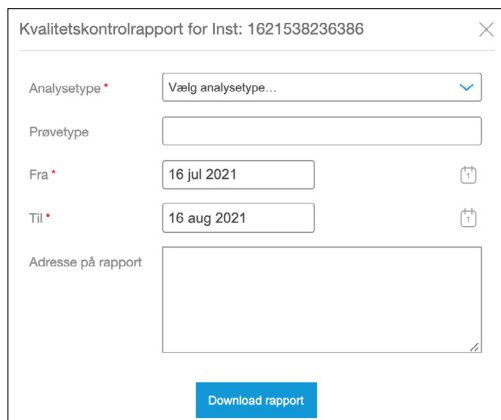
A screenshot of a form titled 'Kvalitetskontrolrapport for Inst: 1621538236386'. The form contains several input fields: 'Analysetype' with a dropdown menu showing 'Vælg analysetype...', 'Prøvetype' with a text input field, 'Fra' with a date input field showing '16 jul 2021', 'Til' with a date input field showing '16 aug 2021', and 'Adresse på rapport' with a large text area. At the bottom of the form is a blue button labeled 'Download rapport'.

4.5 Individuelle indstillinger

Der kan foretages opdateringer af navn, kontaktoplysninger og adgangskode.


Sådan opdateres dine individuelle oplysninger:

1. Log på Connect Manager.
2. I øverste højre hjørne på siden skal du trykke på dit navn og vælge "Profil" i rullemenuen.
3. Rediger alle de relevante oplysningsfelter i profilen.
4. Tryk på 'Anvend ændringer'.

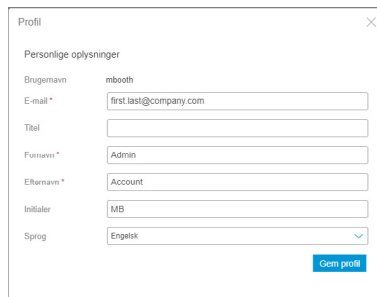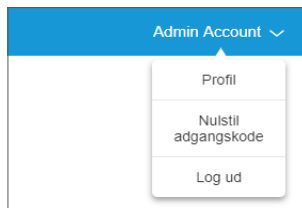A screenshot of a "Profil" form. The form is titled "Personlige oplysninger" and contains several input fields: "Brugernavn" (mbooth), "E-mail" (first.last@company.com), "Titel", "Fornavn" (Admin), "Efternavn" (Account), "Initialer" (MB), and "Sprog" (Engelsk). A blue button labeled "Gem profil" is located at the bottom right.

Sådan ændres din adgangskode:

1. Log på Connect Manager.
2. I øverste højre hjørne på siden skal du trykke på dit navn og vælge "Nulstil adgangskode" i rullemenuen.
3. Indtast "Aktuel adgangskode" og "Ny adgangskode" i de relevante felter. Se afsnit 5.2 vedr. krav til adgangskode.
4. Tryk på "Opdater adgangskode".

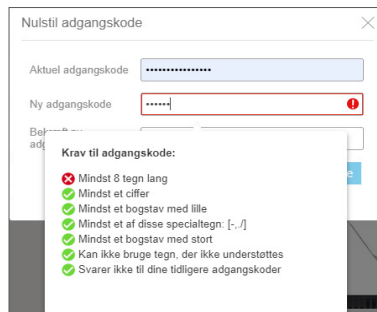A screenshot of a "Nulstil adgangskode" form. It has two input fields: "Aktuel adgangskode" (filled with dots) and "Ny adgangskode" (filled with dots and a red error icon). Below the fields is a list of requirements for the new password, each with a green checkmark: "Mindst 8 tegn lang", "Mindst et ciffer", "Mindst et bogstav med lille", "Mindst et af disse specialtegn: [-./]", "Mindst et bogstav med stort", "Kan ikke bruge tegn, der ikke understøttes", and "Svarer ikke til dine tidligere adgangskoder".

4.6 Organisations- og kvalitetskontrolindstillinger

Organisationsadministratorer kan opdatere indstillinger relateret til hele organisationen fra menuen Indstillinger.

Organisationsindstillinger

Tryk på 'Organisationsindstillinger' for at opdatere tidszone og kontaktoplysninger for organisationen.

Når indstillingerne er opdateret, trykkes på 'Anvend ændringer'.

Southgate Hospital Indstillinger


Region	United States
Sprog	Engelsk
Tidszone *	(GMT-05:00) Eastern Time (USA og Canada) <input type="button" value="v"/>
Kontaktnavn *	Organizational Administrator
Kontakt-e-mail *	administrator@yourorganization.org
Kontakttelefonnr. *	5551234567

Tidszoneindstilling ifølge arbejdsgruppe

Hver arbejdsgruppe er som standard indstillet til organisationens tidszone. Indstillingerne kan tilsidesættes for hver enkelt arbejdsgruppe i indstillingerne for arbejdsgruppe. Vælg 'Tilsidesæt organisationens tidszone' for at vælge den korrekte tidszone fra rullemenuen. Tryk på 'Anvend ændringer'.

← Arbejdsgrupper

Emergency Room

Brugere	Instrumenter	Indstillinger
Navn *	<input type="text" value="Emergency Room"/>	
Beskrivelse	<input type="text"/>	
<p> Arbejdsgruppens tidszoneindstilling håndhæves for alle Instrumenter i Emergency Room</p>		
<p><input checked="" type="checkbox"/> Tilsidesæt organisationens tidszone</p>		
Tidszone *	<input type="text" value="(GMT-08:00) Pacific Time (USA og Canada)"/>	

Kvalitetskontrolindstillinger

Kvalitetskontrol

 Kvalitetskontrolpolitikken kan tilsidesættes på arbejdsgruppeniveau.

Kvalitetskontrol

Kvalitetskontrolpolitik *

Politikinterval

Påkrævet for hvert nyt lot

De følgende funktioner kan konfigureres for at bestemme organisationens kvalitetskontrolpolitik.

Kvalitetskontrol

- **Fra**
- **Obligatorisk** - Hvis kvalitetskontrolpolitikken er udløbet, vil brugere ikke kunne udføre en patientanalyse, før der er udført en kvalitetskontrolanalyse med resultatet BESTÅET.
- **Tilrådes** - Hvis Kvalitetskontrolpolitikken er udløbet, vil der blive vist en advarsel på Instrumentet. Brugere kan acceptere advarslen og fortsætte med analysen.
- **Obligatorisk med tilsidesættelse** - Hvis kvalitetskontrolpolitikken er udløbet, skal brugere enten udføre en kvalitetskontrolanalyse eller tilsidesætte den udløbne kvalitetskontrolpolitik og udføre en patientanalyse ved at indtaste en kommentar med årsagen til tilsidesættelsen.

Kvalitetskontrol

i Kvalitetskontrolpolitikken kan tilsidesættes på arbejdsgruppeniveau.

Kvalitetskontrol

Påkrævet for hvert nyt lot

- ✓ Fra
- Obligatorisk
- Tilrådes
- Obligatorisk med tilsidesættelse

Anvend ændringer

Politik

- **Efter lot** - Brugere skal udføre en kvalitetskontrolanalyse i forbindelse med brugen af et nyt analyselot på et instrument for første gang.
- **Efter type** - Brugere skal udføre en kvalitetskontrolanalyse i forbindelse med brugen af en ny analysetype på et instrument for første gang.

Politikinterval

Indstil et politikinterval ved at sætte glideknappen 'Politikinterval' på 'til'. Indtast et tal og vælg 'Analyser' eller 'Dage' for at bestemme, hvor tit en kvalitetskontrolanalyse er påkrævet for hvert lot eller hver analysetype for hvert instrument.

Påkrævet for hvert nyt lot

Brug glideknappen til at bestemme, om en kvalitetskontrolanalyse bør være påkrævet for hvert nyt lot testkort. Standardindstillingen er 'til', når politik er indstillet til Efter lot. Indstillingen kan redigeres, når politik er indstillet til Efter type.

Kvalitetskontrolpolitik efter arbejdsgruppe

Hver arbejdsgruppe er som standard indstillet til organisationens kvalitetskontrolpolitik. Indstillingerne kan tilsidesættes for hver enkelt arbejdsgruppe i indstillingerne for arbejdsgruppe. Niveaueet for en arbejdsgruppes kvalitetskontrolpolitik kan indstilles på trods af, at organisationens kvalitetskontrol er sat som 'fra'.


← Arbejdsgrupper

Emergency Room

Brugere	Instrumenter	Indstillinger
---------	--------------	---------------

Navn *

Beskrivelse

 Arbejdsgruppens tidszoneindstilling håndhæves for alle Instrumenter i Emergency Room

Tilsidesæt organisationens tidszone

Tidszone *

Kvalitetskontrol

Tilsidesæt organisationens Kvalitetskontrolpolitik

Kvalitetskontrol

Kvalitetskontrolpolitik *

Politikinterval

Påkrævet for hvert nyt lot

Anvend ændringer

Bemærk: Hvis organisationens Kvalitetskontrolpolitik administreres af en middleware-udbyder, vil indstillingerne for Kvalitetskontrol i Connect Manager være 'skrivebeskyttet'. Brugeren kan se de politikindstillinger for Kvalitetskontrol, der sendes af middleware-udbyderen, men kan ikke redigere dem i Connect Manager.

Forskellige softwareversioner til instrumentet

Hvis nogle instrumenter i organisationen benytter en ældre softwareversion, vil de muligvis ikke være kompatible med alle de konfigurerbare indstillinger i Connect Manager. Hvis det er tilfældet, viser Connect Manager en meddelelse for at fremhæve, at ikke alle instrumenter understøtter indstillingerne samt hvilke tiltag, der er nødvendige for at afhjælpe problemet.

Eksempel på kvalitetskontrolpolitik

The screenshot shows a warning dialog box titled "Indstillingskonflikt" (Configuration conflict) with a yellow warning triangle icon. The text inside the dialog reads: "Nogle af de indstillinger, du har konfigureret, kan ikke anvendes på alle Instruments i din organisation på grund af ældre softwareversioner. Du kan enten anvende disse indstillinger på så mange Instruments som muligt og vælge alternative indstillinger for ældre Instruments eller gå tilbage og ændre din konfiguration til at være kompatibel med alle Instruments i din organisation." Below the text are two buttons: "Fortsæt" (Continue) and "Afbryd" (Cancel).

The screenshot shows the "Kvalitetskontrol" (Quality Control) settings page. At the top, there is an information icon and the text: "Kvalitetskontrolpolitikken kan tilslidesættes på arbejdsgruppeniveau." Below this are several settings:

- Kvalitetskontrol:** A dropdown menu set to "Obligatorisk med tilslidesættelse".
- Kvalitetskontrolpolitik *:** A dropdown menu set to "Efter lot".
- Politikinterval:** A toggle switch is turned on, followed by a text input field containing "20" and a dropdown menu set to "Dage".
- Påkrævet for hvert nyt lot:** A toggle switch is turned on.

Below these settings is a warning box titled "Advarsel om Kvalitetskontrolundersøttelse" (Warning about Quality Control investigation) with a yellow warning triangle icon. The text inside reads: "Den Kvalitetskontrolpolitik, du har valgt, kan ikke anvendes på alle Instruments i din Organisation. Vælg en tilbagefaldsindstilling, som skal anvendes på alle resterende Instruments." Below the warning box are two sections: "OVERORDNEDE INDSTILLINGER" (Overall settings) and "TILBAGEFALDSINDSTILLINGER" (Fallback settings). Under "OVERORDNEDE INDSTILLINGER", there is a link: "Gælder for 1 Instrument, der kører den seneste softwareversion". Under "TILBAGEFALDSINDSTILLINGER", there are three sections:

- KVALITETSKONTROL:** A text input field containing "Obligatorisk med tilslidesættelse" and a dropdown menu set to "Fra".
- KVALITETSKONTROLPOLITIK:** A text input field containing "Efter lot".
- POLITIKINTERVAL:** A toggle switch is turned on, followed by a text input field containing "20" and a dropdown menu set to "Dage".

At the bottom, there is a section for "PÅKRÆVET FOR HVERT NYT LOT" (Required for every new lot) with two toggle switches, the first of which is turned on. At the very bottom is a blue button labeled "Anvend ændringer" (Apply changes).

Eksempel på brugertræning

Rediger bruger ✕

Brugernavn *

E-mail *

Titel

Fornavn *

Efternavn *

Initialer


Sprog * ▼

Connect Manager-roller ▼

Instrument-roller ▼


Instrument-arbejdsgrupper ✕ ▼

Håndhæv udløb af Instrumentbrugertræning

 **Advarsel om understøttelse af udløb af brugertræning**

Der er 1 Instrument i din organisation, der ikke understøtter udløb af brugertræning.

[Se Instruments uden understøttelse](#)

Træning gyldig til * 

5 Øvrigt

5.1 Logge på Connect Manager

Sådan logges ind på Connect Manager:

1. Enten:
 - Åbn Connect App på din mobile enhed eller
 - Brug en webbrowser, og gå til connect.lumiradx.com.
2. Indtast organisationens adgangskode, hvis det er første gang, der opnås adgang til Connect Manager.
Bemærk: Organisationens adgangskode skal kun bruges til førstegangsbesøgende. Næste gang du besøger stedet, vil du gå direkte til login-skærm billedet.
3. Indtast 'Brugernavn' og 'Adgangskode' i de relevante felter.
4. Tryk på 'Login'.

Sådan nulstilles din adgangskode:

1. Enten:
 - Åbn Connect App på din mobile enhed eller
 - Brug en webbrowser, og gå til connect.lumiradx.com.
2. Tryk på 'Har du glemt din adgangskode?'
3. 'E-mail' – indtast din e-mailadresse. Der vil blive sendt en midlertidig valideringskode til din e-mailadresse.
4. Opret din nye adgangskode
 - 'E-mail' – indtast din e-mailadresse.
 - 'Valideringskode' – indtast den midlertidige valideringskode, som blev sendt til din e-mail.
 - 'Ny adgangskode' – indtast din nye adgangskode.
 - 'Indtast adgangskode på ny' – indtast din nye adgangskode.

Bemærk: Hvis der er konfigureret en brugerkonto uden en e-mailadresse, vil brugeren blive bedt om at angive en ny adgangskode efter login første gang.

Sådan oprettes din nye adgangskode

- 'Nuværende adgangskode' – indtast din nye adgangskode.
- 'Ny adgangskode' – indtast din nye adgangskode.
- 'Indtast adgangskode på ny' – indtast din nye adgangskode

5.2 Krav til brugernavn og adgangskode

Krav til brugernavn:

- Brugernavnet må maks. være 20 tegn langt
- Brugernavnet skal være unikt i forhold til alle andre brugere i organisationen
- Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver

Krav til brugerens adgangskode:

- Der skelnes mellem store og små bogstaver
- Skal bestå af min. 8 tegn
- Kræver mindst 1 ciffer
- Skal indeholde et specialtegn (de tilladte tegn er -,./)
- Kræver mindst et bogstav med lille
- Kræver mindst et bogstav med stort
- Efter 10 mislykkede forsøg vil brugeren midlertidigt blive låst ude af Connect Manager i 30 minutter. Organisationsadministratoren til Connect Manager skal kontaktes, hvis adgangskoden skal nulstilles.

5.3 Programopdateringer

LumiraDx Connect App opdateres automatisk gennem telefonens App Store. Webversionen af appen opdateres også automatisk og kræver ingen handlinger fra organisationens side.

6 Kundeservice

For produktsupport og hjælp med tilslutning henvises til LumiraDx kundeservice på customerservices@lumiradx.com.

Telefonnummeret til den lokale kundeservice kan findes på kundeservicesiden på lumiradx.com.

7 Sikkerhed

LumiraDx tilvejebringer og håndhæver sikkerhed og databeskyttelse i Connect-systemets konstruktion udover politikker og processer. For at gøre dette har vi implementeret følgende forsigtighedsregler med hensyn til databeskyttelse:

- Alle data in-transit eller hvilende i systemet er krypteret til FIPS 140-standarder.
- Slutpunkter og protokoller bruger dataverificerings- og integritetsmekanismer for at forebygge hacking.
- Komplet kryptering bruges mellem sikre slutpunkter for at beskytte data, når de overføres via offentlige eller ikke-sikrede netværk.
- Data overføres anonymiserede gennem systemet, indtil de når det elektroniske patientjournalssystem, hvor de igen kan identificeres til en patient.
- Identificerbare og pseudonymiserede data lagres kun, hvis informationssikkerheds- og databeskyttelseskontrol er i overensstemmelse med de myndigheds- og lovgivningsmæssige krav, der er relevante for patientens geografiske område.
- Kun fuldstændigt anonymiserede data sendes til LumiraDx til performance-overvågning og analyse.

7.1 Compliance med generel forordning om databeskyttelse (GDPR)

Sammen med dets sikkerhedsbeskyttelse har LumiraDx sikret sig, at det overholder hver del af GDPR.

8 Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

En administrator eller bruger, som bruger LumiraDx Connect Manager og EHR Connect for første gang skal læse og acceptere følgende meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

Din accept af denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

Ved at bruge disse programmer angiver du, at du godkender vilkårene i vores aktuelle meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, som angivet nedenfor. Hvis du ikke godkender vilkårene i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, må du ikke bruge disse programmer.

Personlige oplysninger, der indsamles af os

Vi kan indsamle følgende personlige oplysninger fra dig, når du bruger LumiraDx tjenester eller produkter:

1. Kontooplysninger: når du bruger programmet, vil der blive oprettet en konto til dig af LumiraDx eller af din organisations administrator. Kontoen vil inkludere et brugernavn, en e-mailadresse, adgangskode, arbejdsgruppe og fulde navn.
2. Når du bruger programmet: Vi vil registrere oplysninger om programbrug for at have et revisionsspor. Dette vil inkludere oplysninger om, hvor programmet blev brugt (hvilken organisation), hvornår du brugte programmet, og hvilke opgaver du udførte under brugen.
3. Patientoplysninger. For at sikre, at patienten kan identificeres og de korrekte analyseresultater forbundet med patienten i jeres elektroniske patientjournalssystem.
4. Analyseresultater. Hvilke analyser, der blev udført på hvilke patienter og resultaterne, når EHR Connect anvendes.

Hvad vi bruger dine personlige oplysninger til?

Formål:

- Tilvejebringe vores tjenester til dig og vedligeholde din konto.
- Sikre at brugere har adgang til oplysninger, der er relevante for deres rolle og kun deres rolle.
- Sørge for overensstemmelse med forskrifter.
- Dataanalyse og statistisk forskning for at hjælpe os med bedre at forstå, hvordan vores produkter bruges.
- Undersøge misbrug af din konto, svindel og inddrivelse af gæld.

Vi vil muligvis anonymisere og aggregere personlige oplysninger, vi er i besiddelse af (sådan at de ikke direkte identificerer dig). Vi vil muligvis bruge anonymiserede og aggregerede data til formål, der inkluderer testning af vores it-systemer, til forskning, dataanalyse, forbedring og udvikling af vores produkter og tjenester.

Hvem vi deler dine personlige oplysninger med?

Vi vil muligvis dele personlige oplysninger med følgende parter:

- Virksomheder i samme virksomhedsgruppe som os: med det formål at yde en tjeneste til dig og forstå vores brug af vores produkter og tjenester.
- Andre tjenesteudbydere og konsulenter: som f.eks. virksomheder, der understøtter vores it eller hjælper os med at analysere de data, vi er i besiddelse af.
- Myndighederne eller vores kontrolinstanser: når vi er forpligtet hertil i kraft af loven eller for at hjælpe i deres undersøgelser eller initiativer for energisektoren.
- Politi og retshåndhævelse: for at hjælpe med undersøgelse og forebyggelse af kriminalitet, når loven kræver det.

Vi deler ikke personlige oplysninger med andre end ovenfor nævnte. Vi kan dele aggregerede statistiske oplysninger og analyser med tredjeparter om brugere af vores produkter og tjenester, men vi vil sikre os, at ingen kan identificeres ud fra disse oplysninger, inden vi deler dem.

Overførsel af dine personlige oplysninger internationalt

De personlige oplysninger, vi indsamler, kan blive overført til og lagret i lande uden for den Europæiske Union. Nogle af disse jurisdiktioner kræver forskellige niveauer af beskyttelse med hensyn til personlige oplysninger og, i visse tilfælde, kan lovene i disse lande være mindre beskyttende, end den jurisdiktion, hvor du almindeligvis bor. Vi vil tage alle rimelige hensyn for at sikre, at dine personlige oplysninger kun bruges i henhold til denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger og gældende databeskyttelseslovgivning og oplysningerne respekteres og holdes sikre.

Hvor længe lagrer vi personlige oplysninger?

Vi vil lagre dine personlige oplysninger i en periode, der er fastsat i henhold til nationale retningslinjer og lovmæssige krav.

Dine rettigheder med hensyn til dine personlige oplysninger

Du har følgende rettigheder med hensyn til dine personlige oplysninger, uanset om du er en bruger af LumiraDx Connect som sundhedspersonale eller patient:

- retten til at blive informeret om, hvordan dine personlige oplysninger bruges
- retten til at få adgang til personlige oplysninger, vi har om dig
- retten til at anmode om at få personlige oplysninger, vi har om dig, rettet
- retten til at anmode om at få dine personlige oplysninger blokeret eller slettet, hvor behandling ikke overholder gældende databeskyttelseslove.

For at udøve alle disse rettigheder, eller hvis du skulle have spørgsmål om dine rettigheder, bedes du kontakte os ved brug af de oplysninger, der findes i afsnittet 'Kontakt os' nedenfor.

Hvis du har et problem med, hvordan vi bruger dine personlige oplysninger, kan du også klage til UK Information Commissioner's Office eller din lokale tilsynsmand for databeskyttelse. Vi er her for at hjælpe og tilskynder dig til at kontakte os først for at få løst et problem.

Ændringer til denne meddelelse

Vi kan fra tid til anden opdatere denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger. Når vi ændrer denne meddelelse på en håndgribelig måde, vil vi opdatere versionsdatoen nederst på denne side. Vi vil forsøge at give dig rimelig varsel om væsentlige ændringer til denne meddelelse, medmindre vi forhindres i at gøre det. Hvis påkrævet ifølge loven vil vi anmode om dit samtykke til ændringer i måden vi bruger dine personlige oplysninger på.

Kontakt os

Udførlige oplysninger om LumiraDx's politik til beskyttelse af personlige oplysninger findes på vores websted lumiradx.com. I tilfælde af spørgsmål om eller klager i forbindelse med de oplysninger, vi har om dig, bedes du e-maile os på: privacy@lumiradx.com

C-IGS-GUI-40002 R1 LumiraDx Connect Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

9 Juridisk meddelelse

Adgang til og brug af LumiraDx Connect Manager og EHR Connect er underlagt vilkårene for anvendelse og program og/eller slutbrugerlicensaftaler indgået som en del af adgangen til disse systemer. LumiraDx og/eller dens licensgivere (som er tredjepartsejere af intellektuelle ejendomsrettigheder brug i alle tilvejebragte programmer) ejer alle intellektuelle rettigheder i de tilvejebragte programmer og relateret dokumentation. Ingen andre rettigheder end retten til at bruge systemet som en del af en indgået program- og/eller brugerlicensaftale til slutbrugere garanteres til, eller i, patenter, copyright, databaserettigheder, fabrikskhemmeligheder, handelsnavne, varemærker (uanset om registreret eller ikke registreret), eller andre rettigheder eller licens med hensyn til programmet.

Alle garantier til de tilvejebragte systemer skal være i overensstemmelse med de accepterede vilkår i program- og/eller brugerlicensaftalerne. Garantien gælder ikke i tilfælde af eventuelle defekter eller fejl i programmet, som skyldes brug af programmet, der strider mod LumiraDx's instruktioner, eller modificering eller ændring af programmet af nogen part anden end LumiraDx eller LumiraDx's behørigt bemyndigede konsulenter eller agenter.

Intellektuel ejendom: LumiraDx Connect Manager og EHR Connect og alt tilvejebragt LumiraDx dokumentation er beskyttet under loven. Den intellektuelle ejendom af LumiraDx tjenester og produkter forbliver hos LumiraDx. Oplysninger om relevant intellektuel ejendom om vores produkter kan findes på lumiradx.com/IP.

Juridisk meddelelse: Copyright © 2021 LumiraDx Inc og LumiraDx UK. Alle rettigheder forbeholdes. LumiraDx, LumiraDx logoet og visse LumiraDx produktnavne er varemærker tilhørende LumiraDx UK eller dets associerede selskaber, registreret i Storbritannien, USA og andre lande.